


## ulti med Influenza A/B Testkassette - Vergleich beflockter Tupfer mit Polyester Standardtupfern

Der neue beflockte Tupfer im ulti med Influenza A/B-Test bietet mehrere Vorteile:

- Senkrechtstehende Nylonfasern wirken wie eine weiche Bürste und ermöglichen so die bessere Aufnahme von Zellmaterial.
- Kapillarwirkung zwischen den Nylonfasern ermöglicht effizientere Flüssigkeitsaufnahme.
- Die Probe bleibt näher an der Tupferoberfläche und wird dadurch auch wieder besser an das Extraktionsmedium abgegeben.

Auf diese Weise verbessert der beflockte Tupfer die Empfindlichkeit des ulti med Influenza A/B-Tests.

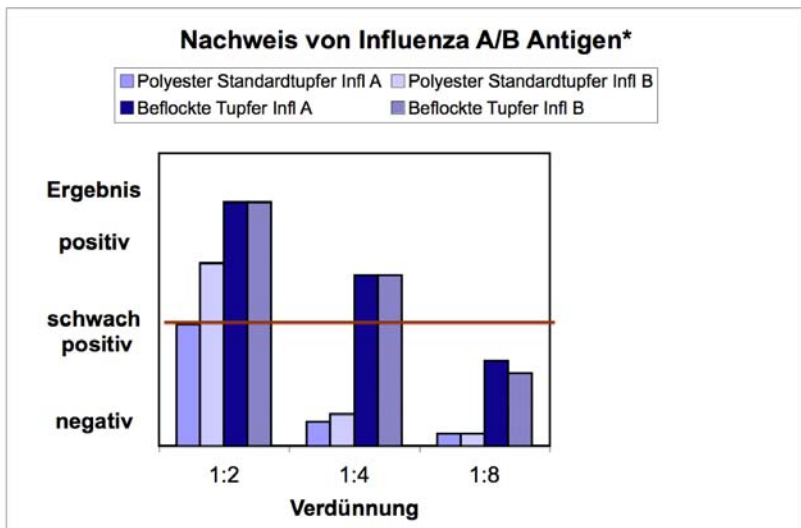

\* Der Vergleich der Tupfer wurde mit dem Ulti med Rapid Influenza A/B 004A474 und Lösungen von Influenza A und Influenza B positiv Material in unterschiedlichen Verdünnungen durchgeführt.