


## ulti med Streptococcus B Testkassette - Vergleich beflockter Tupfer mit Polyester Standardtupfern

Der neue beflockte Tupfer im ulti med Streptococcus B-Test bietet mehrere Vorteile:

- Senkrechtstehende Nylonfasern wirken wie eine weiche Bürste und ermöglichen so die bessere Aufnahme von Zellmaterial.
- Kapillarwirkung zwischen den Nylonfasern ermöglicht effizientere Flüssigkeitsaufnahme.
- Die Probe bleibt näher an der Tupferoberfläche und wird dadurch auch wieder besser an das Extraktionsmedium abgegeben.

Auf diese Weise verbessert der beflockte Tupfer die Empfindlichkeit des ulti med Streptococcus B-Tests.

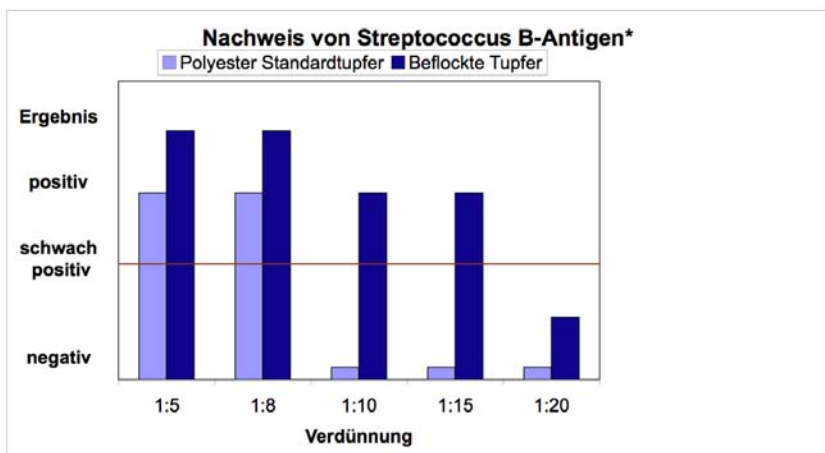

\* Der Vergleich der Tupfer wurde mit dem ulti med Streptococcus B Test # 014B280 und Lösungen von Strep B Positivkontrolle in unterschiedlichen Verdünnungen durchgeführt.